



Home zdravé!

UNIVERZÁLNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ SHIATSU  
GYVM23



## Obsah krabice

- 1 ks Vivamax univerzální masážní přístroj shiatsu
- 1 ks **přípojný kabel adapteru**
- 1 ks návod na použití

## Pozor!

Poradte se s lékařem, jestliže:

- Jste těhotná
- regulátor srdeční frekvence je
- existují obavy týkající se zdravotního stavu

## Bezpečnostní upozornění


Před použitím přístroje si laskavě pozorně přečtěte tento návod na použití. Tento návod na použití si uschovejte pro pozdější použití, učiňte ho přístupným i pro ostatní uživatele a předpisy dodržujte.

1. Nepoužívejte přístroj, jestliže je jeho vnější plastový kryt rozbitý, nebo chybí součástky.
2. Uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Nestavějte se na přístroj a nesedejte si na něj.
4. Po jídle se doporučuje počkat jednu hodinu a pouze potom používat přístroj.
5. V průběhu jeho provozu ho neodpojujte od elektrické sítě, a nevypínejte přístroj hlavním vypínačem. Před jeho vypnutím vždy zastavte masáž.
6. Provádějte údržbu přístroje dle obsahu návodu na použití a vždy ho používejte dle jeho určení. Popis si přečtěte před prvním použitím, protože ten obsahuje takové informace, která slouží k zabránění případným nehodám.
7. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od obalového materiálu! Hrozí nebezpečí udušení.
8. Nikdy nenechávejte přístroj pod proudem bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy ho odpojte od zdroje proudu!
9. Než zastrčíte přístroj do sítě, vždy se přesvědčte, že je přístroj vypnutý, respektive, že údaje na adpтеру přístroje týkající se napětí odpovídají platným místním údajům týkajícím se napětí.
10. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vysokofrekvenčních elektromagnetických zařízení.
11. Udržujte přístroj a kabel daleko od teplých povrchů (radiátor, sporák, kamna), od sálavého tepla.
12. Udržujte přístroj a kabel daleko od vlhkosti a vody. Nepoužívejte přístroj ve stoje ve vodě.
13. Konektor elektrického zařízení musí být vždy snadno dostupný.
14. Zjistíte-li poškození kabelu nebo zástrčky, namočí-li se zařízení, nebo spadne-li do vody, nepřipojujte ho do proudu, obraťte se na servis uvedený v záručním listě.
15. Před čištěním vždy vytáhněte zařízení ze zásuvky.
16. Nikdy nerozpojujte kabel adaptéru, chcete-li odpojit zařízení. V každém případě vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky.
17. Výrobek používejte výhradně dle jeho určení! Používání, které není v souladu s určením výrobku, má za následek ztrátu záruky. Nepoužívejte součástky, doplňky, které nejsou součástí balení. Nepokoušejte se zařízení sami opravit.
18. Zařízení používejte výhradně s jeho adaptérem.

19. Nespěte v průběhu používání přístroje.
20. Nepokládejte nic do otvorů zařízení.
21. Nepoužívejte zařízení, jsou-li v ovzduší aerosolové plyny nebo je málo kyslíku.
22. Zařízení při používání ničím nezakrývejte, protože se by se mohl motor přehřát, a to by mohlo způsobit požár.
23. Nikdy ho nezvedejte za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo.
24. Než odpojíte zařízení od proudu, zastavte masáž dálkovým ovladačem.
25. Neházejte s ním, nebouchejte do něj a chraňte ho před ostrými předměty!
26. Zařízení je projektováno výhradně pro domácí použití, nejedná se o lékařský přístroj.
27. Nepoužívejte ho venku.
28. Tento produkt není určen k tomu, aby byl používán osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí), nebo osobami, které nemají dostatečné zkušenosti a/nebo znalosti, vyjma případu, kdy jsou pod dohledem osoby odpovídající za jejich bezpečnost, nebo pokud od ní dostali instrukce týkající se používání zařízení. Děti musí být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
29. Zařízení má funkci nahřívání, kterou lze zapnout na masážních hlavách. Osoby necitlivé na horko mají používat zařízení opatrně. Osobám se slabým krevním oběhem a s kožní alergií se používání zařízení nedoporučuje.
30. Nepoužívejte přístroj v případě, že je teplota v místnosti vyšší než 40 ° C!
31. Pokud máte jakékoli zdravotní potíže, vyžádejte si před použitím zařízení stanovisko Vašeho lékaře.
32. Osobám s kardiostimulátorem se používání zařízení nedoporučuje, pokud ho přesto chtějí používat, mají si vyžádat stanovisko svého lékaře.
33. Jste-li těhotná, trpíte-li diabetickou neuropatií, máte-li implantát, konzultujte se svým lékařem.
34. Zařízení je opatřené ochranou proti přehřátí. Pokud nezačíná činnost, nechte ho odpočinout 15-30 minut a poté ho zkuste opět zapnout.
35. nepoužívejte zařízení místo léčebného ošetření!
36. Přístroj se nedoporučuje používat před spaním, může totiž stimulovat krevní oběh a tím může povzbudit a znesnasdnit usínání.
37. Ucítíte-li při používání zařízení nepohodlí nebo bolest, zařízení vypněte a obraťte se na svého ošetřujícího lékaře.
38. Nepoužívejte přístroj v posteli.
39. Nestavějte se a nelehejte si na zařízení. Přístroj je určen pro použití v sedě.
40. Neopírejte se o zařízení, když při masáži měníte polohu.
41. Výrobek používejte výhradně dle jeho určení! Používání, které není v souladu s určením výrobku, má za následek ztrátu záruky. Nepoužívejte součástky, doplňky, které nejsou součástí balení. Nepokoušejte se zařízení sami opravit.
42. Osobám se slabým krevním oběhem a s kožní alergií se používání tohoto zařízení nedoporučuje.
43. Neházejte s ním, nebouchejte do něj a chraňte ho před ostrými předměty!
44. Pokud máte jakékoli zdravotní potíže, vyžádejte si před použitím zařízení stanovisko Vašeho lékaře.

## Použití přístroje

1. Opatrně vybalte přístroj! Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní!
2. Umístěte si přístroj na krk tak, že vsunete ruce do těchto dvou vytvořených kapes (dle přiloženého obrázku)!
3. Pro aktivaci masáže stiskněte tlačítko **Zapnutí/vypnutí masáže** na panelu nacházejícím se na straně přístroje pro masáž krku. Přístroj vypnete, jestliže stlačíte tlačítko podruhé.
4. Pro změnu směru točení masírovacích hlav stiskněte tlačítko pro **Změnu směru otáčení!** Pro zapnutí vyhřívání stiskněte tlačítko **Zapnutí/vypnutí vyhřívání**. Druhým stisknutím tlačítka můžete funkci vyhřívání vypnout. Zapnutí vyhřívání signalizuje červené světlo.
5. jestliže už nepoužíváte přístroj pro masáž krku, vypněte ho tlačítkem **Zapnutí/vypnutí masáže**, poté ho odpojte od zdroje proudu.

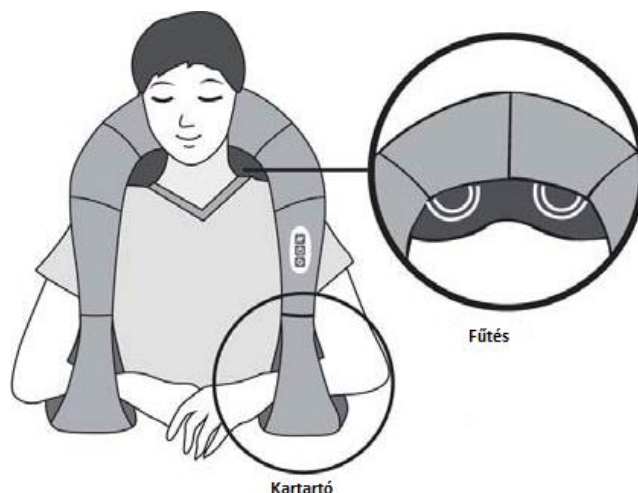

## Ovládací panel



1. Tlačítko pro změnu směru otáčení
2. Tlačítko Zapnutí/vypnutí masáže
3. Tlačítko Zapnutí / vypnutí vyhřívání

Vivamax univerzální masážní přístroj shiatsu vylepšuje masáž tepelnou terapií. Zlepšuje krevní oběh, poskytuje jemnou, osvěžující masáž.

## Technické údaje

Název produktu:	Vivamax univerzální masážní přístroj
Kód produktu:	GYVM23
Napětí:	220-240 V
Výstupní napětí adapteru	12 V DC 1,5 A
Výkon:	18 W
Automatické vypínání	Po 15 minutách

## Uchovávání

Přístroj uchovávejte na chladném, čistém a suchém místě. Nejlepší je uchovávání v originálním balení. Dbejte na to, aby na nahřívací polštář nic nemohlo tlačit, nebo ho nic nemohlo poškodit.

## Manipulace s odpadem

zařízení nelze vyhodit do komunálního odpadu.

V souvislosti s předpisy týkajícími se zařízení ohledně ochrany životního prostředí (elektrický odpad) kontaktujte laskavě příslušné orgány v místě vašeho bydliště.



Značení označuje, že se zařízení nemůže dostat do komunálního odpadu v Evropě. Toto zařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu.

Každý jednotlivý spotřebitel je povinen všechna elektrická nebo elektronická zařízení odevzdat ve sběrně nebo u obchodníka ve svém bydlišti nezávisle na tom, zda tento obsahuje nebo neobsahuje škodlivé látky, aby je bylo možné předat k ekologické

likvidaci. Ohledně zneškodnění se obraťte na příslušné místní orgány nebo na prodejce!

Na webové stránce [www.vivamax.hu](http://www.vivamax.hu) naleznete další užitečné informace a popisy. Na naší stránce si můžete prohlédnout celou naši nabídku týkající se uchování zdraví, jakož i náš vyhledávač obchodů.

Kromě Vámi vybraného přístroje Vám doporučujeme i následující výrobky, které taktéž najdete na webové stránce: [www.vivamax.hu](http://www.vivamax.hu)

- Modely **Ultrazvukových zvlhčovačů Vivamax**
- **Digitální vlhkoměr a teploměr Vivamax** pro sledování vlhkosti
- **Kompresorové inhalátory** pro řešení problémů s dýchacími cestami



**Home zdravé!**

**Maďarský distributor:**



**VIVALDI**

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Tel.: 06-1/889-9080; Fax.: 06-1/889-9095

[www.vivamax.hu](http://www.vivamax.hu); [info@vivaldi.hu](mailto:info@vivaldi.hu)