

Sonický elektrický zubní kartáček


s UV dezinfektorem

Dr. Mayer

LIFE & HEALTH

Návod k použití

Model: GTS2050UV

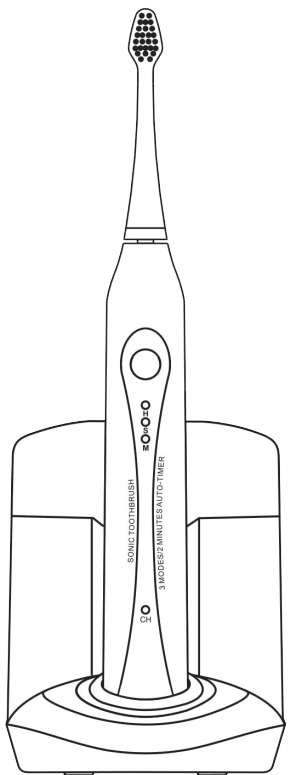

Před použitím výrobku si přečtěte celý návod.
Dobře si jej uložte.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Elektrický kartáček používaný podle návodu je bezpečný a účinný. Jako každé elektrické zařízení však vyžaduje dodržování základních pravidel bezpečnosti, zejména v přítomnosti dětí.

PŘED POUŽITÍM SI PROČTĚTE CELÝ NÁVOD

POZOR NA VODU

Nepodceňujte nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Základnu nabíječky s ultrafialovým (UV) dezinfektorem nepokládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení do umývadla, vany či záchodu.
2. Chraňte zařízení před pádem do vody či jiné tekutiny.
3. Spadne-li zařízení do vody, nedotýkejte se jej. Okamžitě jej odpojte.
4. Nepoužívejte přístroj při koupání.
5. Před čištěním odpojte nabíječku s UV dezinfektorem ze sítě. Před dalším zapojením dbejte, aby byly všechny součásti suché.

POZOR NA ELEKTRICKÝ PROUD

Nepodceňujte nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Přístroj připojujte výhradně do elektrické zásuvky s napětím uvedeným na štítku na spodku základny.
2. Tento přístroj může fungovat na napětí v rozsahu 100 – 240 V.
3. Zárukou kompatibility nejsou napěťové převodníky.
4. Zástrčku do zásuvky nezapojte násilně.
5. Pokud zástrčka do zásuvky nepasuje, nelze přístroj použít.

UPOZORNĚNÍ

Nepodceňujte nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby zodpovědné za jejich zdraví.
2. S přístrojem si nesmí hrát děti.
3. Přístroj používejte pouze k účelu popsánému v této příručce.

Je určen k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte nástavce a příslušenství bez doporučení výrobce.

4. Zubní kartáček je předmět osobní péče a není určen k použití více osobami, v zubních ordinacích či institucích.
5. Pokud používáte zubní pastu, která obsahuje peroxid vodíku, jedlou sodu nebo jiný bikarbonát (jak je obvyklé v bělicích zubních pastách), důkladně nástavec i rukojeť kartáčku čistěte, aby plasty nepopraskaly.
6. Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozenou šňůrou, zásuvkou, nabíječkou nebo dezinfekční UV jednotkou. Nepoužívejte přístroj, který dobře nefunguje, přístroj poškozený například pádem nebo přístroj, který se dostal do vody. Zjistíte-li jakékoliv poškození, přístroj ihned vypněte a nepoužívejte.
7. Chraňte kartáček, nabíjecí základnu a napájecí šňůru před horkými předměty.
8. Pokud vám kartáček začne v ústech působit nepříjemnosti nebo bolest, přestaňte jej používat, poraďte se se zubním specialistou.
9. Nepokoušejte se z přístroje vyndat baterii.
10. Nemyjte přístroj v myčce.
11. Pokud kontrolka UV světla zůstane svítit po otevření víka, nepoužívejte nabíjecí základnu s UV dezinfikátorem. Ultrafialové světlo může být škodlivé očím a pokožce. Uchovávejte zejména nabíjecí základnu s UV dezinfikátorem mimo dosah dětí.
12. Kontrolka UV světla je při a po dezinfekčním působení horká. Na horkou kontrolku nesahejte.
13. Bez řádně vložené odkapávací nádoby nenasazujte do přístroje nástavec s kartáčkem a nepoužívejte UV dezinfikátor.

POZOR NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA

1. O používání elektrického kartáčku v době dvou měsíců po operačním zákroku v ústní dutině nebo na dásních se poraďte se zubním lékařem.
2. Pokud se s čištěním zubů elektrickým kartáčkem objeví silné krvácení, nebo pokud se po týdnu užívání stále objevuje slabé krvácení, poraďte se s lékařem.
3. Osoby s kardiostimulátory nebo jinými implantovanými zdravotnickými prostředky musí použití elektrického kartáčku předem konzultovat s lékařem nebo s výrobcem zařízení.
4. Osoby se zdravotními potížemi musí použití elektrického

kartáčku předem konzultovat s lékařem.

5. Kartáček prošel odbornými zkouškami a získal osvědčení ETL a CE.
6. Po použití nabíječku odpojte ze zásuvky.
7. Nenechávejte přístroj nabíjet v době, kdy spíte nebo odpočíváte.
8. Nenechávejte přístroj při nabíjení bez dozoru. Pokud se přístroj nepoužívá, odpojte jej ze sítě.
9. Napájecí šňůru netahejte, nepoužívejte ji k nošení přístroje, nepřivírejte ji do dveří, nenechávejte ji na ostrých hranách a rozích. Na šňůru nestavte jiné předměty.
10. Nesahejte na zástrčku a přístroj mokřými rukama.
11. Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
12. Případnou výměnu UV lampy smí provádět pouze odborník. Výměnu nemůže provádět uživatel.
13. Při výměně UV lampy hrozí nebezpečí nadměrného působení ultrafialového světla.
14. Kryt lampy je opatřen zámkem na ochranu před nadměrným působením ultrafialového světla. Neodstraňujte tuto ochranu a vyvarujte se servisních zásahů bez demontáže.
15. Přístroj splňuje podmínky federálních předpisů USA, vč. 21 CFR, kap. 1, podkap. J, radiologické zdravotní podmínky.


Přístroj je určen k domácímu použití.

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU VEMTE NA VĚDOMÍ:

- Žádné součásti výrobku nejsou určeny k servisní údržbě uživatelem.
- Nabíječku ukládejte na suchém a bezpečném místě. Před použitím přístroje rozmotejte šňůru.
- V případě poruchy přístroj nerozebírejte. Při výměně součástí a manipulaci hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte odbornému servisu.
- Pokud dojde k poškození napájecí šňůry, je třeba ji nechat odborně vyměnit. Výměnu žádejte v odborném servisu.
- Pokud přístroj upadne, vyměňte nástavec s kartáčkem, a to i v případě že není zřejmé žádné poškození.

TENTO NÁVOD SI DOBRĚ ULOŽTE

Popis

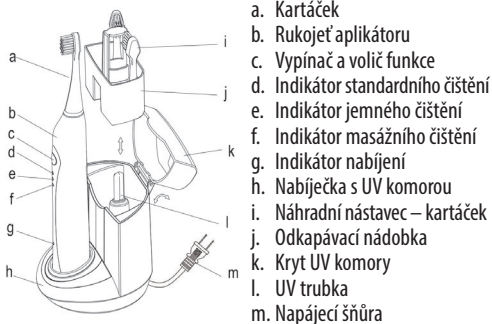

- Kartáček
- Rukojeť aplikátoru
- Vypínač a volič funkce
- Indikátor standardního čištění
- Indikátor jemného čištění
- Indikátor masážního čištění
- Indikátor nabíjení
- Nabíječka s UV komorou
- Náhradní nástavec – kartáček
- Odkapávací nádobka
- Kryt UV komory
- UV trubka
- Napájecí šňůra

Zapojení a dobíjení

- Přístroj GTS2050UV má voděodolnou rukojeť, je elektricky bezpečný, konstrukčně vyhovuje užívání v koupelně.
- Po zapojení napáječe (m) do elektrické zásuvky se modře rozsvítí UV světlo (l) pod matným krytem. UV světlo automaticky zhasne po 6 až 8 minutách.
- Vložte aplikační rukojeť kartáčku (b) do nabíječky (h). Rozsvítí se indikátor nabíjení (g). Úplné nabití trvá minimálně 24 hodin. Přístroj pak může přibližně dva týdny fungovat bez nabíjení.
- Při každodenním užívání lze kartáček ukládat do nabíječky a udržovat plně nabití. Přístroj má ochranu proti přebíjení baterie.

Způsob použití GTS2050UV

Otevřete kryt UV komory (k), vyndejte nástavec s kartáčkem (i) a nasadte jej shora do rukojeti (b). S kartáčkem lze použít jakýkoliv druh zubní pasty. Přiložte kartáček k zubům před zapnutím přístroje. Nedoje tak k postříkání z kartáčku.

Po vyčištění zubů opláchněte nástavec důkladně pod tekoucí vodou a otřete jej. Uložte nástavec do odkapávací nádobky (j) v UV komoře (h) a zavřete kryt komory (k). UV lampa se zapne a během 6 až 8 minut zničí bakterie a mikroorganismy. Poté se automaticky vypne.

Technika čištění zubů

- Vedte hlavu kartáčku pomalu od zubu k zubu.
- Na každém zubu kartáček několik sekund přidržte.
- Kromě zubů očistěte také dásně. Nejprve z vnější strany, poté z vnitřní a nakonec žvýkací plochy.
- Kartáčkem na zuby netlačte, působení na zuby nechte na přístroji.

Režimy čištění zubů

GTS2050UV nabízí několik způsobů čištění pro různé potřeby péče:

- (H) – standardní způsob neúčinnějšího čištění zubů
- (S) – jemný způsob čištění citlivých zubů a dásní
- (M) – masážní působení jemných pulzů na stimulaci dásní

Dvouminutový časovač

Přístroj GTS2050UV je koncipován na optimální dobu čištění (2 minuty). Po dvou minutách se automaticky vypne. Mezitím po každých 30 sekundách přeruší čištění, aby upozornil uživatele na změnu zóny. Obecně se zuby a dásně pro čištění dělí na čtyři zóny.

Přepínání režimů čištění

- Zapínání, vypínání a volba způsobu čištění se ovládá jedním spínačem (c). Stiskem a přidržením tlačítka se přepínají funkce (H) – standardní čištění > (S) – jemné čištění > (M) – masáž dásní > vypnutí.
- GTS2050UV se po zapnutí stiskem tlačítka automaticky spouští v režimu standardního čištění.
- Dalšími stisky tlačítka se přepínají funkce (H) – standardní čištění > (S) – jemné čištění > (M) – masáž dásní.
- K přepnutí do masážního režimu je třeba tlačítko stisknout třikrát.
- Po každém stisku vypínače a voliče funkce se rozsvítí příslušný indikátor a uživatel vidí, která funkce je zvolena.
- Přístroj se vypne příslušným počtem stisků tlačítka. Pokud běží v režimu (H), je třeba tlačítko stisknout třikrát. Pokud běží v režimu (S), je třeba tlačítko stisknout dvakrát. Pokud běží v režimu (M), stačí tlačítko stisknout jednou.

Dezinfikování kartáčků

- Otevřete kryt (k) a nasadte kartáček na trn ve dně odkapávací nádobky (j). Kartáček otočte štětinami k UV lampě.
- Po zavření krytu (k) se UV lampa rozsvítí. Vypne se automaticky přibližně po sedmi minutách. Pokud dojde k otevření krytu během dezinfikování, UV lampa se automaticky vypne.
- Doporučuje se sonický kartáček dezinfikovat před a po každém použití.

Čištění a doporučení

- Po vyčištění zubů opláchněte kartáček důkladně pod tekoucí vodou.
- Odpojte nástavec kartáčku z rukojeti a omývejte jej samostatně. Před uložením do UV komory nabíjecí jednotky a dezinfikování kartáček osušte a zavřete průhledný kryt.
- Pokud je odkapávací nádobka (j) znečištěná, otevřete kryt UV komory (k), nádobku vysadte a omyjte vodou se slabým čistícím prostředkem.
- Nabíjecí stanici před čištěním odpojte. K čištění použijte suchou nebo navlhčenou utěrku.

Likvidace

- Nabíjecí část přístroje se nesmí umývat pod tekoucí vodou, ani není možné ji ponořit.
- Postavte nabíječku na suché a bezpečné místo.
 - Součástí výrobku jsou dobíjecí baterie. Baterie je zakázáno likvidovat jako domácí směsný odpad. Baterie odevzdejte na sběrném místě k recyklaci.

PŘEDPISY FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Jeho provoz je vázán následujícími dvěma podmínkami:

- nesmí působit žádné škodlivé rušení a
- musí přijímat jakékoliv rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí fungování.

POZNÁMKA: Toto zařízení podle ověřovacích zkoušek vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení při konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasu či televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, musí se uživatel pokusit rušení odstranit:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Použijte kartáček dále od rušeného přijímače.
- Používejte k zapojení kartáčku zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
- Poradte se se zkušeným odborníkem na rádiové a televizní vysílání.

Kontakty:
Distributor pro ČR a SR:
Best Brands Company s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
info@bbcomp.cz
www.doctor-mayer.cz,
nebo www.bbcomp.cz

