

DŮLEŽITÉ POJISTKY

Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny zde uvedené vám pomůžou tento výrobek bezpečně a správně použít a také zabránit zranění u sebe nebo ostatních.

Při používání elektrických výrobků, zvláště pokud jsou přitom děti, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽÍVÁNÍM

NEBEZPEČÍ VODA

- Aby se snížilo nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:
 - Nepokládejte ani neschlaďte výrobek tam, kde by mohl spadnout nebo být stažen do vody, umyvadla nebo toalety.
 - Nepokládejte ani neukadejte nabíječku do vody nebo jiné kapaliny.
 - Nesahejte na nabíjecí zařízení, které spadlo do vody nebo jiné tekutiny. Okamžitě je odpojte.
 - Nepoužívejte při koupání.
 - Odpojte nabíjecí zařízení před čištěním a zajištěte, aby byl suchý před připojením do elektrické zásuvky.

NEBEZPEČÍ - NAPĚTÍ

- Nepřipojujte nabíjecí zařízení k zásuvce s jiným napětím, než je uvedeno na spodní straně nabíječky (100-240V).
- Měňte napětí nezaručují kompatibilitu.
- Neladte zástrčku do zásuvky.
- Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, ujistěte se, že zástrčka není polarizovaná zástrčka (jedna kolík je širší než druhý). Jako bezpečnostní prevence, bude tento modu zasunut do polarizované zásuvky pouze jedním směrem. V případě že zástrčka nezapadá plně do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud stále nezapadá, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Nesnažte se prorazit tento bezpečnostní prvek.

ZDRAVOTNÍ - VAROVÁNÍ

- Pokud jste měli ústní chirurgický zákrok nebo chirurgický zákrok dásní během uplynulých dvou měsíců, před použitím výrobku, kontaktujte svého zubního lékaře.
- Obratě se na svého zubního lékaře, pokud dojde k nadměrnému krvácení během používání tohoto výrobku nebo lůden přetřáváva menší krvácení po jednom použití.
- Poradte se s lékařem nebo výrobcem implantátu před použitím tohoto výrobku, pokud máte nějaké dotazy týkající se kombinovaného použití tohoto výrobku s kardiostimulátorem nebo jiným implantovaným lékařským přístrojem (V).

UPOZORNĚNÍ


Aby jste snížilo nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl dostatečný dohled nebo instrukce týkající se použití přístroje dospělou osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby snižovali s výrobkem.
- Používejte tento výrobek pouze pro jeho zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
- Tento výrobek je určen k čištění zubů, dásní a jazyka pouze. Nepoužívejte žádné přílohy nebo hlavice, jiné, než ty doporučené výrobcem.
- Je-li váš zubní pasta obsahuje peroxid, jedlá soda nebo jiný hydrogenuhličitan (obějný v bělicích zubních past), prosím důkladně vyčistěte hlavu kartáčku a rukojeť, aby se zabránilo praskání plasty.
- Určité kapalné ústní vody mohou poškodit zařízení způsobením krytu nebo nádrže praskání, při použití ústní vody, opláchnutí nádrže a hlavní jednotky s vodou, ihned po použití. Buďte obzvláště opatrní, při mytí připojení hadic a hlavní jednotku anádrže.
- Nikdy naplňte nádrž s teplou vodou! Dásně mohou být velmi citlivé a mohou být snadno poškozeny horkou vodou.
- Použité zařízení v rozsahu okoli teplotě 32F – 104 F.
- Nikdy provozujte tento výrobek pokud má poškozené kabel, zástrčku nebo nabíječku. Nepoužívejte tento výrobek pokud nepracuje správně, pokud došlo k jeho pádu nebo poškození, nebo k jeho pádu do vody. Okamžitě přestaňte jeho používání objeví-li se poškození v žádném případě.
- Udržte výrobek na vzdálenosti od horkých povrchů.
- Pokud pokusíte nepohodlí nebo bolest, v puse, přestaňte používat tento výrobek, a obraťte se na svého zubního lékaře.
- Nemyjte výrobek v myčce.
- Po použití výrobku v ideálním případě použít zubního kartáčku, pokud máte nějaké zdravotní problémy. Kartáčky, které byly testovány, certifikovány nebo odpovídají ETL.
- Nikdy neklesávejte nebo neovazujte leteckými předměty do otvůru.
- Určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku.


ZADRŽTE TYTO NÁVODY

Oral Irrigator

FŐ EGYSEG

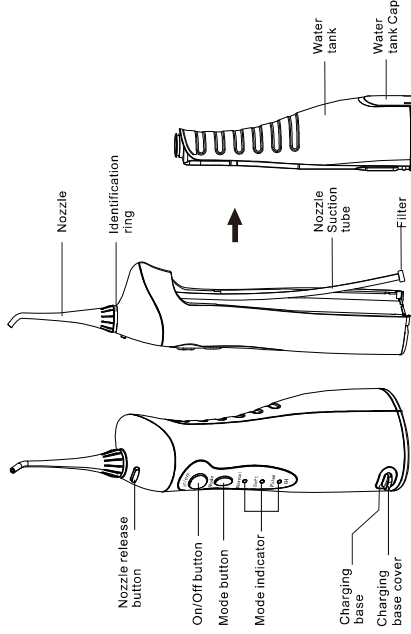

ACCESSORY

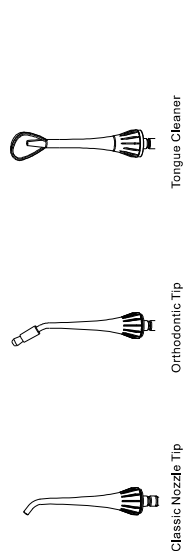

ZAČÍNÁME

Nabíjení přístroje (Obr. 1)

Vezměte nabíječku spinotního krytu dolů a vložte přístrojovou zástrčku pevně do zásuvky přístroje (ujistěte se, že uvnitř zásuvky nezůstane žádnou kapalinu před vložením zástrčky síťového přívodu).

1. Vložte nabíjecí adaptér pevně do zásuvky.
2. Indikátor "CH" blíká, když přístroj nabíje, a to bude stále poté, co je zatřepání plně nabílé.
3. Recover the cover on to charger base again after charging finished. Vymete kryt v nabíjecího zařízení po dokončení nabíjení.

Poznámka:

V případě, že indikátor "CH" blíká v průběhu nebo po zavlažování, to znamená, že je třeba dobit baterii. Plně nabíjení bude trvat asi 8 hodin.

JAK POUŽÍVAT

1. Připojte trysku na jednotku. (Obr. 2)
2. Otevřete víko nádrže vody, aby se naplnil nádrž vodou, jehož teplota nepřesáhne 40°C, pak zavřete víko. (Obr. 3)
3. Nebo, posuňte nádrž na vodu dolů z jednotky naplněte nádrž vodou, jehož teplota nepřesáhne 40°C pak připevněte nádrž na jednotku. (Obr. 4)
4. Stiskněte tlačítko "Mode" pro vodu režim, který si přejete. Během procesu můžete měnit pracovní režim (Obr. 5)

Normální: pro běžné čištění.

Měkky: pro šetrné čištění citlivých dásní.

Push: pro čištění a masírování dásní.

5. Držte přístroj ve směru pohybu z tryskou bodu směrem k zubům.
6. Držte svá ústa pootevřená tak, aby voda mohla odtékat.

7. Stiskněte tlačítko "On/Off" abyste začali proces. (Obr. 6)

1. Směřovat tok vodního paprsku v úhlu 90 stupňů k zubům a dásním
2. Směřovat vodního paprsek pomalu po zubech
3. Směřovat proud vody podél línie dásní se špičkou trysky v úhlu 90 stupňů k dásním
4. Čistit mezi zuby a kolem rovnátek, korunek a můstku velmi důkladně.
8. Stiskněte tlačítko "On/Off" a pak stiskněte tlačítko pro uvolnění trysky, abyste nahradili jinou tryskou, kdy budete potřebovat. (Obr. 7)
9. Po dokončení procesu čištění, stiskněte tlačítko "On / Off" na klíč znovu pro vypnutí přístroje.

Po použití zařízení (Obr. 8)

1. Otevřete uzávěr nádrže vody a vypusťte vodu v nádrži.
2. Stiskněte tlačítko "On/Off" pro zapnutí přístroje, a vypusťte vodu uvnitř spotřebiče.
3. Stiskněte tlačítko "On/Off" znovu pro vypnutí přístroje a uzavřete uzávěr nádrže vody.
4. Očistěte přístroj měkkým a suchým hadříkem.

Poznámka:

Abyste zabránili šíření bakterií, ujistěte se, že neexistuje žádná zbývající voda uvnitř přístroje. Pokud nebudete používat tento přístroj delší dobu, nezapomenejte otřít a neprodělaně osušte přístroj před uložení.

ÚDRŽBA

K čištění zařízení používejte pouze vodu nebo neutrální čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky (například, ocel nebo odstraňovač vodního kamene), protože může dojít k poškození zařízení. Nemějte horkou vodu více než 50° C. Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od oblastí s vysokou teplotou a vyvarujte přístroj před přímým slunečním zářením.

Hlavní jednotka

1. Odstraňte nečistoty ošetřením hadříkem s tekutým mýdlem a seifele suchým hadříkem.
2. Neponořujte hlavu jednotku do vody k vyčištění.
3. Vysušte po promytí vodou.

Hlava nádrže na vodu

Seřadte špičku a nečistoty hadříkem.

Tryska

- Omyjte vodu a ořete měkkým hadříkem.
- Vyměňte trysky každých 6 měsíců.

Sací trubice vody

- Omyjte vodu a ořete měkkým hadříkem.
- Neotvíbejte, netahajte nebo nekrut'te sací trubici vody.


Nádrž

- Omyjte vodu a ořete měkkým hadříkem.
- Vysušte nádrž pokud ho nepoužíváte delší dobu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
To nefunguje	Zakoupil jste výrobek nebo to byl ponechán bez použití po dobu delší než 3 měsíce	Nabijete jednotku po dobu nejméně 8 hodin
Funguje to jen na pár minut, a to i po nabití	Baterie dosáhla konce své životnosti Doba nabíjení byla nedostatečná.	Kontaktujte centrum služeb pro podporu Nabijte po dobu nejméně 8 hodin.
Tlak vody je velmi nízký	Špička uvízlá v trysce. Tryska je deformovaná	Vyměňte trysku.
Voda nevychází.	Špička uvízlá ve filtru Nádrž je prázdná. Spotřebič je příliš nakloněn při používání.	Vyčistěte filtr Naplňte nádrž. Použijte přístroj ve vertikálním stavu.

SONIC ZUBNÍ KARTÁČEK

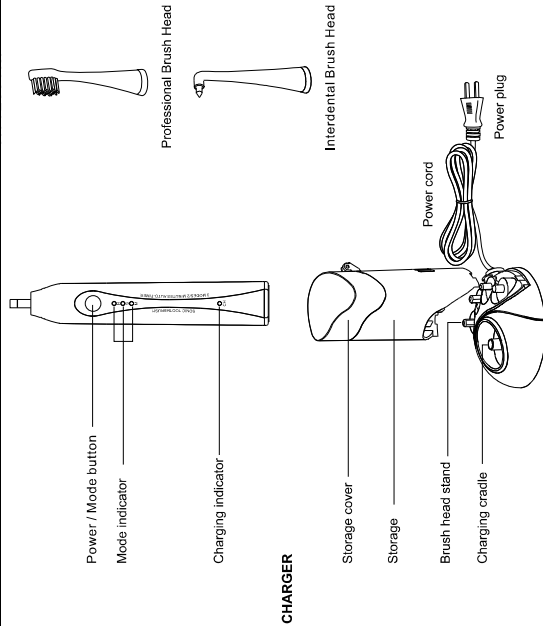


CHARGER

ZAČÍNÁME

Nabíjení kartáčku


Ujistěte se, že vypnete kartáček na zuby před nabíjením. (Obr.1)
Umístěte rukojeť do nabíječky. Indikátor nabíjení se rozsvítí modře. (Obr.2) Poznámky:

- Trvá minimálně 24 hodin pro plné nabití baterie.
- Kartáček se musí nabíjet po dobu 24 hodin, v případě:
 - To je poprvé, když použijete zubní kartáček;
 - Zubní kartáček nebyl používán po dobu delší než 3 měsíce;
 - Byla udržena baterie plně nabitou, doporučujeme ponechat kartáček v nabíječce, když nepoužíváte. Nemějte být kartáček zabíhává, ale toliko je v normální.
 - Během nabíjení se může objevit teplo.
- Trvání nabíjení doby bude kratší, protože baterie bude starší.
- V případě, že zubní kartáček funguje pouze po dobu jednoho krátkého času po plném nabití, to znamená, že baterie se blíží ke konci svého životního cyklu. Kontaktujte Centrum služeb pro podporu.

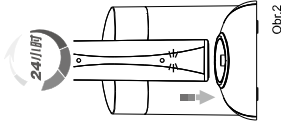


Obr.1


Obr.2

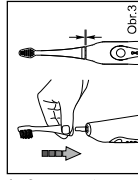


Obr.3

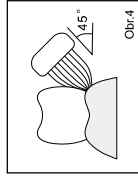


Obr.4

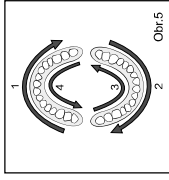

Obr.5

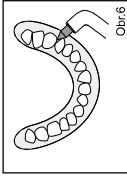

Obr.6

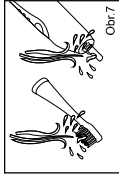

Obr.7

ÚDRŽBA


Ujistěte se, že jste výrobek odstavili z od elektrické zásuvky před čištěním.

Nabíječka


- Vyláhněte skladování abyste ho odstranili. (Obr.8)
- Pomocí měkkého hadříku setřete nečistoty na nabíječe a skladování. (Obr.9)
- čistěte zástrčku pravidelně, aby jste zajistili, že zůstane v dobrém stavu. Hromadění prachu nebo špíny na zástrčce může způsobit úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo požár.

Zubní kartáček

- Sejměte hlavu kartáčku.
- Ořete všechny povrchy vlnkým hadříkem a umístěte hlavu zpět do nabíječky. Nepoupojujte rukojeť do vody.
- Opláchněte hlavu kartáčku a šlešiny po každém použití.
- Nemyjte v myčce.
- Jakákoliv jma údržba by měla být prováděna autorizovaným servisním technikem nebo, že výrobek neobsahovat žádné částky opravene uživatelém.

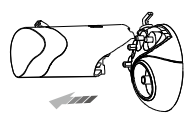

Obr.8

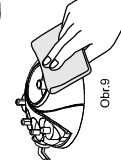

Obr.9

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Zubní kartáček nefunguje.	Právě jste si koupil produkt, nebo nebyl používán déle než 3 měsíce.	Nabijení hlavní jednotku po dobu alespoň 24 hodin.
Slabé nebo se zmenší vibrace	Kartáček na zuby tvrdé pitělskne zuby.	Umístěte hlavu kartáčku opatrně proti své zuby.
Zubní kartáček funguje pouze na krátkou dobu dokonce bezprostředně po nabití.	Baterie dosáhla konce své životnosti doba nabíjení byla nedostatečná.	Kontaktní centrum služeb pro podporu. Nabijení hlavní jednotku po dobu alespoň 24 hodin.


LIKVIDACE

Zdroj energie tohoto výrobku je nikl-metal hydrové baterie, která může být recyklována. Na konci životnosti výrobku, vždy vyměňte baterie, předtím než výrobek bude zlikvidován a recyklován podle místních požadavků pro nakládání s odpady. Máte-li dotazy na recyklaci, kontaktujte místní zastoupení společnosti pro nakládání s odpady.

Nerozebírejte výrobek na jiných místech než při likvidaci v místě určení. Předčasnou manipulaci se značí výrobek. Dodržte základní bezpečnostní opatření: Přístroj musí být odpojen od sítě při vyjmutí baterie.


Ústní irigátor

- Odstřahněte 3 ks gumové nožičky na dno držadla.
- Vložte sroubovák do slotu umístěného ve spodní části rukojeti a otáčejte proti směru hodinových ručiček k uvození spodního víčka.
- Vydrhněte baterie z rukojeti.

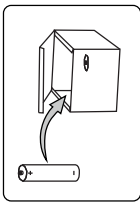


Sonic zubní kartáček


- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že zcela vypustíte jednotku vyčkom.
- Pomocí sroubováku odstřahněte šroub a kryt baterie. (Obr.10)
- Uchopte rukojeť obráceně, stiskněte kartáček hřídele a odstraňte vnější součásti rukojeti. (Obr.11)
- Vložte sroubovák vedle baterie připojení a kroucením rozbité spojení.
- Vyměňte desku obou zářivých baterií; plusového póluše. (Obr.12)
- Dávejte pozor, abyste nezakládali negativní a pozitivní pól baterie. Nepřipolujte sportřebič k síti znovu poté, co jste odstranili baterie.
- Recykloujte nebo likvidujte baterie správně. Zptejte se svého místního úřadu pro nakládání s odpady, pokud přijímají komponenty zubního kartáčku pro recyklaci.

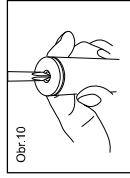

Obr.10

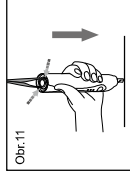

Obr.11

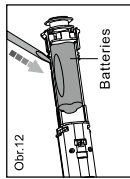

Obr.12

DENTAL MIRROR

Použití zubní zrcadla

- Umožňuje vidění v určitých místech v ústech, kde viditelnost je obtížná nebo nemožná.
- Po stisknutí tlačítka napájení, LED zrcadla se rozsvítí. Stiskněte znovu, LED zrcadla se zhasne.

