

CZ

## NÁVOD K POUŽITÍ Sonic Toothbrush GTS2080



### Důležité bezpečnostní pokyny

**Při používání elektrických spotřebičů, zvláště pokud jsou přítomny děti, je důležité přijmout základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:**

**Pečlivě si přečtěte tento návod.**

**NEBEZPEČÍ** - Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- 1** Neinstalujte ani nedržte výrobek na místech ze kterých může snadno spadnout do vany nebo umyvadla.
- 2** Ujistěte se, že napájecí zdroj v elektrické zásuvce odpovídá napětí vyznačené na klasifikačním označení na elektrickému zubnímu kartáčku.
- 3** Aby se zabránilo možnosti vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, nepoužívejte nabíječku v koupelně a neponořujte kabel, zástrčku nebo nabíječku do vody nebo jiné tekutiny. Nevyplachujte nabíječ vodou.
- 4** Pokud se to stane, že je nabíječka spadne do vody, nezachycujte je hned rukou, ale je nejprve odpojte od napájecího zdroje a vyjměte ji z vody.

**UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit možné riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob.**

- 5** Nepoužívají elektrický spotřebič, pokud je na něm poškozený kabel nebo zástrčka, nebo v případě, že přístroj přestane pracovat, nebo je jakýmkoli způsobem poškozený, nebo spadl do vody. Odneste přístroj do autorizovaného servisu na testování, opravu nebo další nastavení.
- 6** Chcete-li vypnout přístroj, uchopte pevně zástrčku a vytáhněte ji přímo od zdroje napájení, ale nedělejte to tahem za kabel. Mokrými rukama nijak nedotýkejte kabelu.
- 7** V případě, že tento výrobek se používá v přítomnosti dětí nebo ho používají děti a osoby se zdravotním postižením je nutný zvláštní dohled.
- 8** Před vyhozením, nerozebírejte kartáček ani ho změňujete.
- 9** Nenamáčejte kartáč do horké vodě.
- 10** Kartáče mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod zvláštním dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje.

- 11** a chápu všechny možné nebezpečí. Přístroj nepotřebuje čistit nebo udržovat děti bez dozoru.
- 12** Děti by neměly hrát se s přístrojem.
- 13** Přístroj a kabel držte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 14** Netlačte kartáčkem zuby nebo dásně s použitím značné síly. Aby se zabránilo možnému poškození, nečistěte si zuby příliš dlouho ve stejné pozici kartáče.
- 15** Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj má viditelné poškození. Nepoužívejte poškozený kartáček.
- 16** Prosíme, poradte se s lékařem, máte-li použít tento kartáček, pokud jste v posledních dvou měsících měly chirurgický zákrok na zuby nebo prošly zubní terapií.
- 17** Při prvním použití kartáčku může se jevit krvácení v ustní dutině. V případě, že krvácení trvá déle než týden, poradte se svým lékařem.
- 18** V případě, že máte kardiostimulátor nebo jiné elektronické zařízení, před použitím kartáčku se poradte s lékařem.
- 19** Aby se zabránilo možnosti vzniku požáru na nabíječ nepokládejte žádné kovové předměty
- 20** Kartáček je určený pouze pro osobní použití a jako takový není určený pro sdílení s jinými uživateli.
- 21** Příložený kabel nelze vyměnit. V případě, že je kabel poškozen přístroj musí být stažený z provozu.
- 22** Tento produkt používejte pouze ke stanovenému účelu a způsobem popsáním v této příručce. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem
- 23** Udržujte kabel daleko od tepelně ošetřených povrchů.
- 24** Kartáček nikdy nepoužívejte ve spánku nebo ve stavu ospalosti.
- 25** Nikdy nevkládejte žádné předměty do kteréhokoliv otvoru či hadice.
- 26** Nepoužívejte ho venku, ani ho nezapínejte v místech, kde se používají aerosol (rozpršovací) výrobky nebo kde jsou zapojení zařízení pro zásobování kyslíkem.
- 27** Dvojitá izolace- Při servisu používejte pouze identické náhradní díly.


**28** Každé tři měsíce se doporučuje vyměnit hlavu kartáčku.

**Uchovejte tento návod.**

## URČENÉ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMĚ

**Poznámka pro připojení ke zdroji elektrické energie:** Toto zařízení má polarizovanou zástrčku (jeden hrot je širší než druhý). Jako preventivní opatření, tato zásuvka může být připojena na polarizovaný zdroj elektrické energie pouze jedním způsobem. V případě, že zásuvka nemůže být správně vložena do napájecího zdroje, otočte ji. Pokud to stále není možné, obraťte se autorizovanému elektrikáři.


### Struktura výrobku

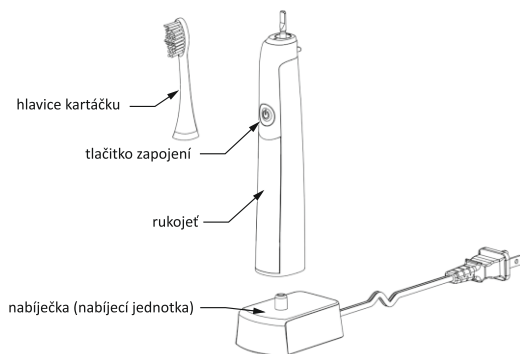

### První použití, před použitím nabíj nabíječku

**1** Připojte nabíjecí jednotku. Umístěte nabíjecí jednotku na stojan, pak připojte napájecí zdroj.


**2** Před plněním vypněte kartáč. Umístěte rukojeť svisle nabíjecí jednotku, zkontrolujte, zda je tyč vstoupila přesně do otvoru ve spodní části rukojeti. (Jak je znázorněno na obraze vpravo). Při nabíjení svítí červeně LED žárovka, rukojeť je nabitá, když LED žárovka svítí modře.

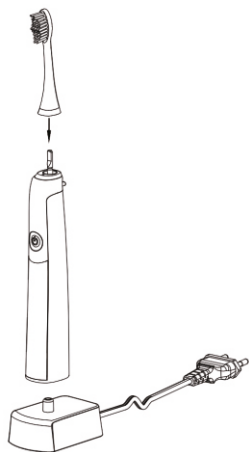

4

### Návod k obsluze


**1** Jemně umístíte hlavice kartáčku na rukojeť.

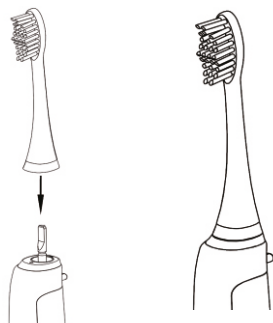

**2** Před zapnutím kartáče, na hlavice kartáčku vytlačte zubní pasty.




**3** Umístěte hlavice kartáčku v ústa a mezi zuby a dásně. (Jak je na obrázku níže).

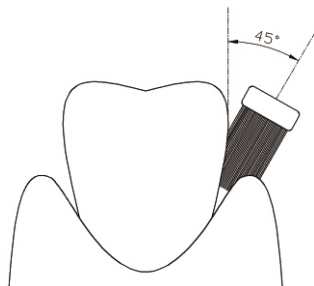

**4** Zapněte rukojeť. Volba oblíbeného režimu. Kartáček je v továrně nastaven tak že zapnutí vždy bude v režimu Clean (čištění), a po 5 sekundách můžete ho přepnout do následujících režimů: Clean → White → Polish → Massage → Sensitive → vypnutí. Po 5 sekund v libovolném režimu stiskněte tlačítko pro vypnutí a on bude vypnut. (jako na obrázku výše)

5

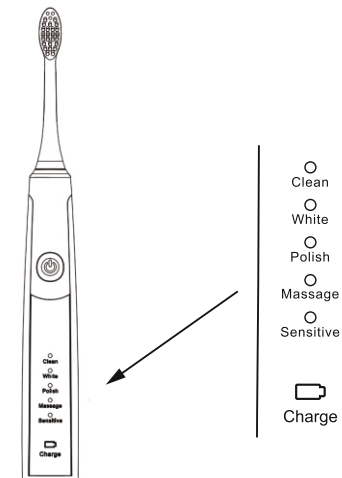

**5** Kartáček pracuje v čtyřech cyklech, přičemž každý trvá po dobu 30 ± 5 sekund. Mezi cykly jsou kratší přestávky. Po čtvrtém cyklu kartáček se automaticky vypne.

**6** Po očištění zuby, výhradně hlavice kartáčku postavte pod tekoucí vodu, opláchněte a vysušte. Pokud je rukojeť kartáče prázdná, umístěte ji zpět na nabíječku a nabíjete.

### Čištění a údržba

Před každým čištěním vypnout z napájecího zdroje.

Měkkým hadříkem otřete vnější část nabíjecí jednotky a rukojeť kartáčku. Nikdy nepoužívejte toxické čisticí prostředky.

**UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte k čištění vnějších částí chemické, ocelové, dřevěné nebo brusivé prostředky.**

**POZOR: Podle doporučení lékaře, hlavice kartáčku je nutně vyměnit každé tři měsíce používání.**

### Odkládání v souladu se ochranou životního prostředí



Vy také můžete pomoci v ochraně životního prostředí! Dodržujte místní předpisy: likvidujte vadné elektronických zařízení v centrech určených k tomuto účelu.

6